



# Brukerveiledning for selvtesting med «SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal» Hurtigtest

## Fremgangsmåte

Det er viktig at du følger fremgangsmåten nøye, slik at du får riktig resultat på testen.  
Les gjennom hele fremgangsmåten før du starter.



Testenhet (individuelt pakket i foliepose med fuktabsorbent)



Ekstraksjonsrør med buffer



Dråpeteller



Steril prøvetakingspinne

1. Utstyret du har fått utdelt skal ligge i romtemperatur i 15 minutter før bruk.  
I tillegg trenger du en egnet søppelpose og en klokke/mobil med varslings.
2. Vask hendene dine godt før du starter.
3. Legg utstyret på et tørt, rent og jevnt underlag (f.eks. bord/benk).
- 4.


- Åpne folieposen
- Testkassetten/testenheten og fuktabsorbent.
- Ikke berør prøvebrønnen (rundt felt) og testfeltet (firkantet felt) på testenheten.
- Kontroller at enheten ikke er skadet og legg den på et tørt, rent og jevnt underlag.
- Sjekk at sirkelen i fuktabsorbenten viser gul farge.

Dersom fargen på kulene er endret fra gul til grønn er testenheten ugyldig og skal kastes.  
Du må da be om nytt utstyr.


**Hvis behov for nytt utstyr, ta kontakt med Lierlegene  
legekontor på: 906 04 558 mellom 08.30 og 15.00 på hverdager.**



Foliepose

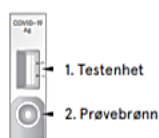


Testenhet

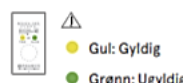


Fuktabsorbent




5. Fjern folien fra røret med væske og plasser røret stående i f.eks. en kopp.  
Pass på at væsken ikke tømmes ut.
6. Åpne pakningen med den sterile prøvetakingspenselen. Ikke berør vatt delen på penselen.
7. Ta prøven fra begge nesebor, start med nesebor med mest væske/snørr.  
Samme prøvetakingspensel skal benyttes i begge nesebor.

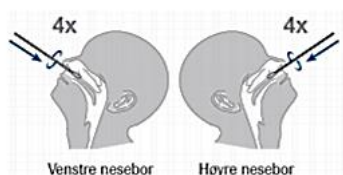

8. Se litt oppover og før penselen rolig ca. 2 cm rett inn i nesen. Roter penselen 4 ganger (bruk ca. 15 sekunder), før den trekkes rolig ut. Gjenta i motsatt nesebor.  
Korrekt prøvetaking er avgjørende for å få et riktig prøvesvar.

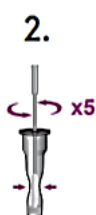


9. Sett prøvetakingspenselen direkte i røret med væske, med vatt delen ned. Klem nederst på røret samtidig som penselen roteres minst 10 ganger. Press ut væsken fra penselen ved å trykke sammen røret, mens penselen samtidig roteres og trekkes opp og ut. Kast penselen i søppelposen.

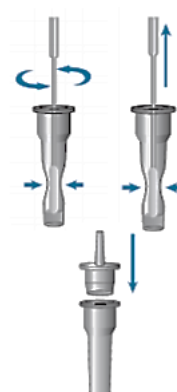

10. Trykk korken med dråpeteller, hardt og godt ned på røret.



11. Snu røret, med korken ned, og drypp 4 dråper prøvemateriale til testkassetts prøvebrønn (rundt felt).
12. Bruk klokke/mobil med varsling og sett tiden til minst 15 minutter.  
Testkassetten skal nå ligge i ro i 15 minutter før avlesning.  
Se «Avlesning av resultat».

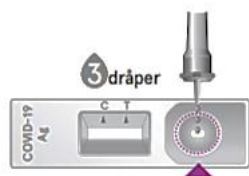

15–30 min.

Les av resultatet etter 15 minutter.  
Resultatet må ikke tolkes etter 30 minutter.



VIKTIG

Ikke les av testresultater  
etter 30 minutter.  
Det kan gi falske resultater.

13. Samle alt brukt testutstyr i søppelposen, når testkassetten er avlest. Knyt posen godt igjen og kast den i vanlig søppel.
14. Vask hendene og underlaget du har brukt.

## Avlesning av resultat

Resultatet vises som fargende linjer i testfeltet (firkantet felt). Sørg for godt lys under avlesning.

### Positiv test

To fargede linjer vises. En linje i kontrollområdet (C) og en linje i testområdet (T). Enhver fargenyanse i testområdet skal vurderes som positiv.



### Negativ test

Kun en farget linje i kontrollområdet (C) vises.



### Ugyldig test

Ingen farget linje i kontrollområdet (C) vises. Testen må i slike tilfeller gjentas med ny prøve og ny testkasset.



## Tolkning av resultater

\*C = Kontrolllinje / T = Testlinje

